


BI-FLEX EVO

Guaina d'Accesso Ureterale

- Punta Atraumatica e Flessibile
- Parte Interna Graduata
- Spirale in Acciaio resistente al Kinking
- Rivestimento Idrofilico in Hydromer®
- Anello Distale in Platino
- Introduttore/ Dilatatore Conico
- Il Più Ampio Diametro Interno



➤ ➤ ➤ ENDO-UROLOGIA

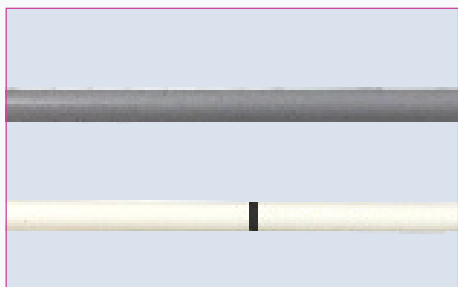

➔ PUNTA FLESSIBILE ATRAUMATICA

Nuova Punta Flessibile:

Permette l'accesso al meato in sicurezza e assicura una progressione atraumatica della guaina attraverso le vie urinarie più complesse.

Spirale anti-Kinking:

La spirale in acciaio all'interno della guaina fornisce resistenza e stabilità permettendo al contempo una facile progressione e retrazione dell'endoscopio.



➔ PARTE INTERNA GRADUATA

Parte Interna Graduata:


Permette di capirne la posizione al fine di misurare la dilatazione dell'uretere con precisione e sicurezza.

Anello Distale in Platino:

Permette la visualizzazione fluoroscopica al fine di confermare la posizione della punta distale.


Introduttore/Dilatatore Conico:

Rastremazione per una introduzione e una dilatazione atraumatica.

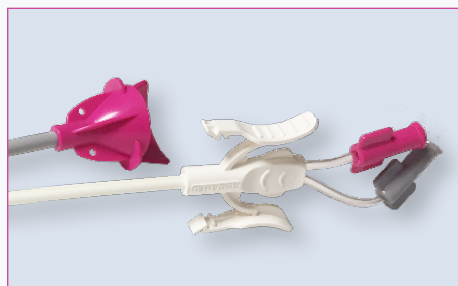

➔ 2 CANALI OPERATIVI

Progettato per facilitare la navigazione attraverso tratti urinari complessi, il Bi-Flex Evo possiede due canali operativi e un catetere di dilatazione. I due canali, del diametro di 3Fr ciascuno, sono dotati di connettori luer lock che permettono l'introduzione di un filo di sicurezza e l'iniezione di un mezzo di contrasto.

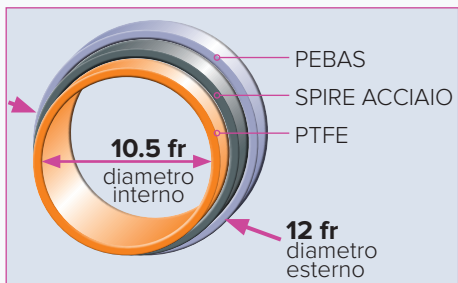

➔ IL PIÙ AMPIO DIAMETRO INTERNO

<< (...) Il diametro interno del Bi-Flex 10/12 è in realtà 11 F, dunque la pressione intrarenale era minore e il flusso d'irrigazione maggiore (...) Il flusso di irrigazione misurato era conforme alle misure della pressione>>*

*T. Sener, J. Cloutier, L. Villa, F. Marson, Buttice, S. Doizi and O. Traxer
France Journal of Endourology, September 18, 2015

Informazioni per ordinare:

Codice prodotto	Diametro interno (Fr)	Diametro esterno (Fr)	Lunghezza (cm)	Descrizione
ROUS1028ST	10	12	28	Bi-Flex Evo Guaina d'Accesso & Dilatazione
ROUS1228ST	12	14	28	Bi-Flex Evo Guaina d'Accesso & Dilatazione
ROUS1035ST	10	12	35	Bi-Flex Evo Guaina d'Accesso & Dilatazione
ROUS1045ST	10	12	45	Bi-Flex Evo Guaina d'Accesso & Dilatazione
ROUS1235ST	12	14	35	Bi-Flex Evo Access Sheath & Dilatation Catheter
ROUS1245ST	12	14	45	Bi-Flex Evo Access Sheath & Dilatation Catheter

MKG-FY-BIFLEX-IT-01
Realizzato da FOCALYS. Le illustrazioni di questo documento non sono contrattuali.
ROCAMED si riserva il diritto di cambiare le specifiche del prodotto senza preavviso.

Per maggiori informazioni visita www.rocamed.com

Rocamed SAM
9 avenue Albert II
98000 Monaco

(+377) 97 98 42 32

info@rocamed.com

www.rocamed.com